

Gebrauchsanweisung

aHc-Hydrogel⁹⁰

Gebrauchsfertiges Hydrogel zur Befeuchtung von trockenen Wunden, sowie zum Lösen von Fibrinbelägen und nekrotischem Gewebe.

Produkteigenschaften:

aHc-Hydrogel⁹⁰ lässt sich auf Grund seiner Eigenschaften gut und schnell, ohne weitere Hilfsmittel applizieren und verbleibt als Hydrogel auf der Wunde. Es hält die Wunde feucht, bildet einen Schutzfilm und fördert damit die Wundheilung.

Die Anwendung von aHc-Hydrogel⁹⁰ ist schmerzfrei und verursacht keine Hautirritationen.

Es gibt keine Einschränkung in der Anwendungsdauer.

aHc-Hydrogel⁹⁰ dient der langfristigen Befeuchtung und Feuchthaltung von Wunden, formt ein ideales Wundheilungsmilieu und unterstützt so den natürlichen Wundheilungsprozess. Das im aHc-Hydrogel⁹⁰ enthaltene Konservierungsmittel (Natriumhypochlorit) kann eine unspezifische Dekontamination auch bei Wunden ermöglichen. Wundgerüche können durch den Einsatz von aHc-Hydrogel⁹⁰ schnell eliminiert werden.

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch gut schütteln!

Vor der Anwendung und beim Verbandwechsel empfiehlt sich eine Wundreinigung und/oder ein Wunddebridement um Exsudat, fibrinoide Ablagerungen und sonstige Verunreinigungen zu entfernen. Nach der Wundreinigung aHc-Hydrogel⁹⁰ mit mehreren Sprühstößen aus kurzem Abstand aufsprühen, bis die Wunde je nach ihrer Beschaffenheit vollständig bedeckt ist. aHc-Hydrogel⁹⁰ kann in Kombination mit Kompressen, Pflastern und anderen Verbandmitteln verwendet werden.

Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Beschaffenheit der Wunde ab und ist der jeweiligen Wundsituation anzupassen. Es kann durch die Konservierungsstoffe ein leichter Chlorgeruch entstehen.

Anwendungseinschränkungen:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten. aHc-Hydrogel⁹⁰ sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Substanzen sind nicht zu erwarten. Eine Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit sollte sorgfältig abgewogen werden. Verwenden Sie aHc-Hydrogel⁹⁰ nicht auf blutenden oder stark nässenden Wunden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung bei Wunden. Nicht schlucken, Augenkontakt vermeiden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden. Die Produkte nur bis zu den auf der Flasche angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach dem Öffnen nicht länger als 90 Tage verwenden.

Zusammensetzung:

Wasser, Natriumhypochlorit <0,06%
(elektro-chemisch aktivierte Mineralsalzlösung),
Lithium-Magnesium-Natrium-Silikat

Vertrieb durch:

Akanni Healthcare GmbH
Krassolzheimer Straße 47
D-97346 Iphofen

Stand der Information:

2017-10

Instruction for Use

aHc-Hydrogel⁹⁰

Ready-to-use hydrogel for moistening of dry wounds, as well as for dissolving fibrin deposits and necrotic tissue.

Product properties:

aHc-Hydrogel⁹⁰ can be quickly and easily applied and remains as hydrogel on the wound surface. It keeps the wound moist, creates a protective film and thus promotes wound healing.

The application of aHc-Hydrogel⁹⁰ on the wound is non-irritating and pain-free, with no restrictions to duration of product use.

aHc-Hydrogel⁹⁰ is for long-term moistening. It keeps wounds moist and forms an ideal wound healing environment, supporting the natural wound healing process.

The aHc-Hydrogel⁹⁰ included in the

Preservatives (sodium hypochlorite) can also provide unspecific decontamination even in wounds.

Wounds odor can be quickly eliminated by the use of aHc-Hydrogel⁹⁰.

Application:

Shake the bottle well before use!

Before use and during change of the wound dressing and / or a wound debridement is recommended to remove exudate, fibrinoid deposits and other impurities.

After the wound cleansing spray aHc-Hydrogel⁹⁰ from a short distance as often until the wound is completely covered according to its condition. aHc-Hydrogel⁹⁰ can be used in combination with compresses, plasters and other dressing material.

There are no restrictions regarding the frequency and duration of use.

The preservatives in aHc-Hydrogel⁹⁰ can cause a slight smell of chlorine.

Application restrictions:

There are no known side effects. aHc-Hydrogel⁹⁰ is contraindicated in patients with known sensitivity or allergic reactions to any of the ingredients. Do not use in combination with other wound cleaning sprays, solutions, gels and pre-saturated dressings. Interactions with other substances are not expected. During pregnancy and whilst breastfeeding aHc-Hydrogel⁹⁰ should be used with caution. Do not use aHc-Hydrogel⁹⁰ on bleeding or exuding wounds.

General safety instructions:

Only apply to external wounds. Do not swallow, avoid eye contact. Keep away from children. Only use intact, undamaged bottles.

Only use the products prior to the expiration date indicated on the bottle. Once opened, product can be used for a maximum of 90 days.

Ingredients:

Water, sodium hypochlorite <0.06% (electrochemically activated mineral saline solution), lithium magnesium sodium silicate

Distributed by:

Akanni Healthcare GmbH
Krassolzheimer Straße 47
D-97346 Iphofen

Date of revision of the text:

2017-10



Artikelnummer
Article number



Vor Nässe
schützen.
Keep dry.




Nur einwandfreie und unbeschädigte
Flaschen verwenden.
Do not use if package is damaged.



Vor Anwendung
Gebrauchsinformation lesen.
Consult instructions
for use.



Flasche vor direkter
Sonnenbestrahlung schützen.
Protect bottle from direct sunlight.

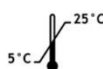

Aufbewahrungstemperatur
Temperature limit



Informationsbeilage
beachten.
Consult information
supplement



Außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
Keep out of reach of children.



Hersteller
Manufacturer



Chargenbezeichnung
Batch name



Verwendbar bis: Monat und Jahr
Expiry date: Month and Year



Prompted GmbH
Am Bahndamm 70
32120 Hiddenhausen
Germany

Made in
Germany

